

Your **Power** for Health



greiner bio-one



# VACUETTE®

Безпечні набори для  
забору крові

Наші інновації для вашої безпеки

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)

# Безпечні Набори для забору крові

## Спеціально для важких вен

БЕЗПЕЧНИЙ набір для забору крові був спеціально розроблений для пацієнтів із важкими венозними захворюваннями, але однаково підходить для будь-якої регулярної ситуації забору крові, завдяки м'якому комфорту, який він надає пацієнту.

Оскільки механізм захисту активується, поки голка все ще знаходиться у вені, забезпечується високий рівень безпеки. Правильна активація шляхом відведення вказується звуковим сигналом.

Захистіть себе і своїх співробітників від ризику травм від уколу голкою. Кожна травма від уколу голкою - це занадто багато.



### Прозоре вікно перегляду

Прозоре вікно перегляду забезпечує чіткий індикатор введення вен.




### Механізм безпеки

Просте ввімкнення запобіжного механізму шляхом легкого натискання на обидві сторони втулки. Правильна активація вказується звуковим сигналом.

### За бажанням

Його можна використовувати для збору крові або інфузії до п'яти годин.

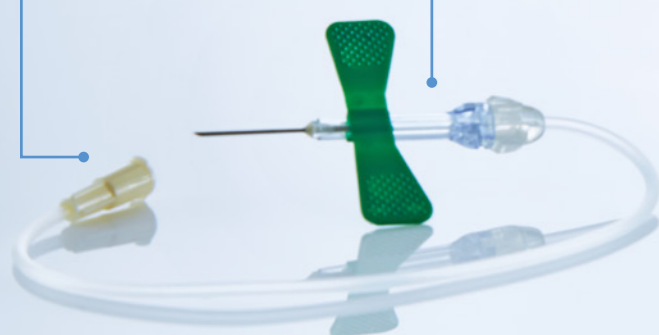

### Більше гнучкості

Різна довжини трубок пропонує більшу гнучкість для забору крові.

## Безпечні Набори для забору крові Комбіновані продукти

Як практичний комбінований продукт, БЕЗПЕЧНИЙ набір для забору крові також доступний у зібраному вигляді.

### Безпечний Комплект для взяття крові +Люер адаптер

- Попередньо прикріплений набір з адаптером Люера, стерильна блістерна упаковка

Обробка оптимізована.



Item No. 450081-84  
Item No. 450095-96  
Item No. 450099



### Безпечний Комплект для взяття крові +Тримач

- Попередньо прикріплений набір з тримачем у стерильній блістерній упаковці.
- Немає необхідності в заправці.
- Практичне, готове до використання рішення, що економить час.

Item No. 450080  
Item No. 450085-88  
Item No. 450160-61


### Безпечний Комплект для взяття крові ++ Тримач культури крові

- Попередньо прикріплений набір з тримачем для культури крові у стерильній блістерній упаковці.
- Розроблено для використання з найбільш часто використовуваними пляшками для гемокультури та пробірками для збору крові VACUETTE® за одну процедуру.
- Набір стерильний і зібраний заздалегідь для зручності економічної ефективності та гарантує, що пацієнту потрібно пройти лише одну венепункцію для всіх процедур.



Item No. 450182-85

## Інструкція по застосуванню \*

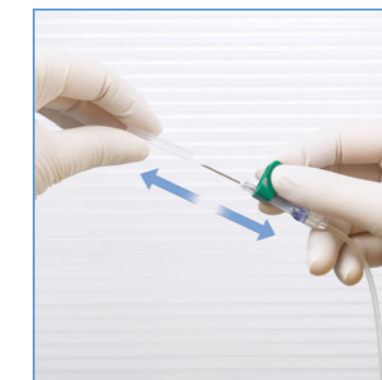


**1** Зніміть захисний ковпачок




**2** Венепункція



**3** Вставте пробірку

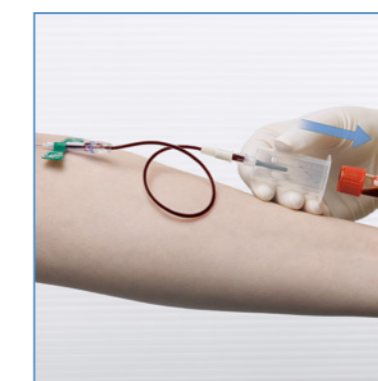


**4** Зніміть останню пробірку

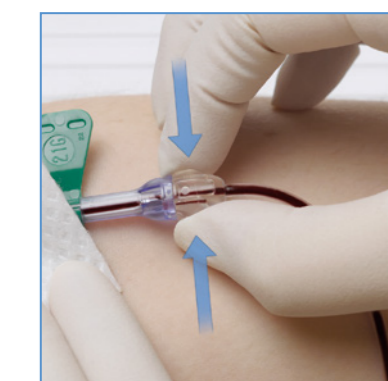

**5** Активуйте механізм безпеки (натиснувши тавідтягнувши світлішу область)



**6** Звуковий клік вказує на активацію

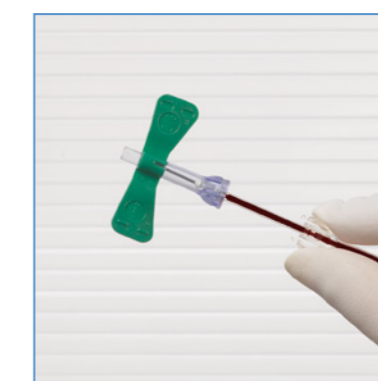

**7** Активованій БЕЗПЕЧНИЙ набір крові



**8** Утилізація

\*Для отримання повної рекомендації щодо використання зверніться до Інструкції з використання кожного продукту.

## SAFETY Blood Collection Sets

Item. No.	Description	Size	Packaging		
			Inner	Outer	
<b>SAFETY Blood Collection/Infusion Sets (sterile)</b>					
450090	SAFETY Blood Collection/Infusion Set	tubing length: 19cm	25G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450091	SAFETY Blood Collection/Infusion Set	tubing length: 19cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450191	SAFETY Blood Collection/Infusion Set	tubing length: 30cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450092	SAFETY Blood Collection/Infusion Set	tubing length: 19cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450192	SAFETY Blood Collection/Infusion Set	tubing length: 30cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
<b>SAFETY Blood Collection Sets + Luer Adapters (sterile)</b>					
450083	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 10cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450081	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 19cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450095	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 30cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450084	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 10cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450082	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 19cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450096	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 30cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
450099	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length: 30cm	25G x 3/4"	50 pcs.	1000 pcs.
<b>SAFETY Blood Collection Sets + Holders (sterile)</b>					
450087	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 10cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450085	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 19cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450160	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 30cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450088	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 10cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450086	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 19cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450161	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 30cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450080	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length: 30cm	25G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
<b>SAFETY Blood Collection Sets + Blood Culture Holders (sterile)</b>					
450182	SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder	tubing length: 19cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450183	SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder	tubing length: 19cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450184	SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder	tubing length: 30cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450185	SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder	tubing length: 30cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.

These products are not made with natural rubber latex or DEHP.



**Austria (Main Office)**

Greiner Bio-One GmbH  
Phone +43 7583 6791-0  
E-Mail office@at.gbo.com

**Hungary**

Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Phone +36 96 213 088  
E-Mail office@hu.gbo.com

**Brazil**

Greiner Bio-One Brasil  
Phone +55 19 3468-9600  
E-Mail office@br.gbo.com

**India**

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.  
Phone +91 120 375 9291  
E-Mail info@gboindia.com

**Netherlands**

Greiner Bio-One B.V.  
Phone +31 172 4209 00  
E-Mail info@nl.gbo.com

**Thailand**

Greiner Bio-One Thailand Ltd.  
Phone +66 38 4656 33  
E-Mail office@th.gbo.com

**China**

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.  
Phone +86 10 83 55 19 91  
E-Mail office@cn.gbo.com

**Indonesia**

Greiner Bio One Indonesia KPPA  
Phone +62 812 1391 3900  
E-Mail office@id.gbo.com

**Portugal**

VACUETTE Portugal S.A.  
Phone +351 252 647 721  
E-Mail info@vacuette.pt

**Turkey**

Greiner Bio-One Turkey  
Phone +90 216 576 6004  
E-Mail office@tr.gbo.com

**France**

Greiner Bio-One SAS  
Phone +33 1 69 86 25 25  
E-Mail accueil@gbo.com

**Italy**

Greiner Bio-One Italia S.r.l.  
Phone +39 02 9438 3340  
E-Mail office@it.gbo.com

**Spain**

Greiner Bio One España, S.A.U.  
Phone +34 91 652 77 07  
E-Mail info@es.gbo.com

**United Kingdom**

Greiner Bio-One Ltd.  
Phone +44 1453 8252 55  
E-Mail info@uk.gbo.com

**Germany**

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics  
Phone +49 7022 948-0  
E-Mail office@de.gbo.com

**Japan**

Greiner Bio-One Co. Ltd.  
Phone +81 3 3505 8875  
E-Mail info@jp.gbo.com

**Switzerland**

Greiner Bio-One VACUETTE  
Schweiz GmbH  
Phone +41 7 12 28 55 22  
E-Mail office@ch.gbo.com

**USA**

Greiner Bio-One North America Inc.  
Phone +1 704 261-7800  
E-Mail info@us.gbo.com

