

making a difference



**КРАЩЕ БЕЗПЕЧНО
THAN SORRY**

VACUETTE®

Транспортна лінія

Транспортування зразків
ніколи не було таким
простим.


greiner
BIO-ONE

Безпечна
транспортування
зразків
відповідно до
чинних інструкцій



Усі наші продукти
оптимізовано, щоб
полегшити
повсякденну роботу
медперсоналу.

БЕЗПЕКА ВАШОГО ПЕРСОНАЛУ

Продукція транспортних ліній VACUETTE® дозволяє безпечно транспортувати лабораторні зразки, такі як кров, сеча або слина (у разі потреби охолоджені) від зразка до лабораторії.


Будьте безпечні, навіть якщо транспортуєте пробірки VACUETTE® Virus Stabilization Tube, що містять зразки SARS-CoV-2, грипу А або В,

за допомогою VACUETTE® TransportLine: ваш персонал постійно та професійно захищений від потенційних інфекцій.

Усі продукти були розроблені для вимогливого клінічного повсякденного використання, тому легко використовувати, легко стерилізувати, міцні та оптимізовані для низької ваги.

КОМПОНЕНТИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛІНІЇ:

- / VACUETTE® Транспортні коробки
- / VACUETTE® Транспортні контейнери
- / Стійки та поролонові вставки для пробірки для забору крові
- / Кулер і прохолодна подушка
- / Транспортні сумки та транспортувальні коробки

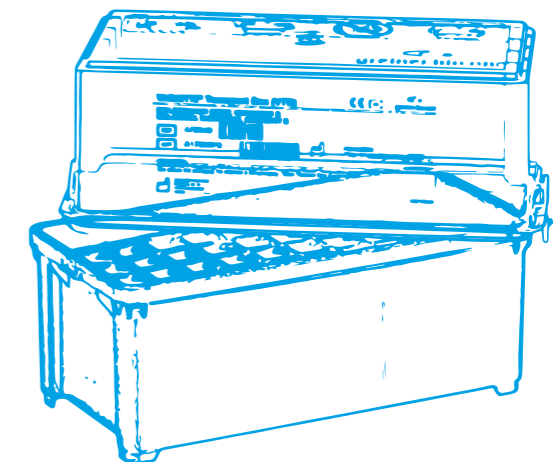

БЕЗ КОМПРОМІСУ НА ЗРАЗОК ЯКОСТІ

Медичні зразки є цінним надбанням. Підтримка цілісності є необхідною умовою для високоякісних аналітичних результатів.

Таким чином, ваші лабораторні зразки постійно захищені від світла в системі транспортування VACUETTE® і, якщо необхідно, можуть зберігатися охолодженими безпосередньо у вторинному контейнері за допомогою ізольованих сумок для транспортування та високоефективних охолоджуючих подушечок протягом тривалого часу. Це означає, що якість ваших лабораторних результатів не залежить від погоди.

Адекватне та належне транспортування зразків є необхідною умовою для стабільних аналітичних результатів.



ВСТАНОВЛЕНО АН
НЕЗАЛЕЖНИЙ
ІНСТИТУТ

Ви можете знайти звіти про випробування в центрі завантажень на нашому веб-сайті www.gbo.com

Транспортна лінія VACUETTE® сертифікована для транспортування біологічних речовин категорії В відповідно до UN 3373. Усі окремі компоненти відповідають вимогам ADR/RID (Інструкції з пакування P650), IATA-DG, ICAO-TI та IMDG Code і пройшли перевірку, на придатність незалежними акредитованими інститутами.



VACUETTE® Транспортні коробки

Транспортні коробки VACUETTE®, виготовлені з поліпропілену (PP), можна штабелювати та придатні для транспортування до 40 пробірок. Коробка є герметичною та має клацання для швидкого та зручного відкриття та закривання. Пінопластовий вкладиш підходить для пробірок діаметром 9-16 мм.



VACUETTE® Транспортні контейнери

Наш транспортний контейнер VACUETTE® - це практичний контейнер із поліпропілену (PP) для транспортування до 12 пробірок. Ємність закрита гвинтовою кришкою та є герметичною. Пінопластовий вкладиш підходить для пробірок діаметром 9-16 мм.



Сумки для транспортування Isotherm

Транспортні сумки Isotherm доступні в різних розмірах для перевезення кількох коробок або контейнерів. Сумки для транспортування міцні, легкі та допомагають підтримувати низьку температуру завдяки теплоізоляційному зовнішньому матеріалу.

ТРИ КОМПОНЕНТИ

для безпечного
транспортування
біологічних речовин


ОБОВ'ЯЗКОВО ТРАНСПОРТИРУЙТЕ ЗРАЗКИ ПРАВИЛЬНО

Відповідно до ADR/RID, IATA, IMDG Code та ICAO-TI, транспортні контейнери для транспортування біологічних речовин категорії В (UN3373) повинні складатися з трьох компонентів.

1 ПЕРША УПАКОВКА

Водонепроникний до перепад тиску 95 кПа.


- / VACUETTE® Пробірка для забору крові
- / VACUETTE® Пробірка для сечі
- / Greiner Bio-One Пробірка для перенесення слини
- / VACUETTE® Пробірка для стабілізації вірусів
- / VACUETTE® ВТОРИННА пробірка з кришкою

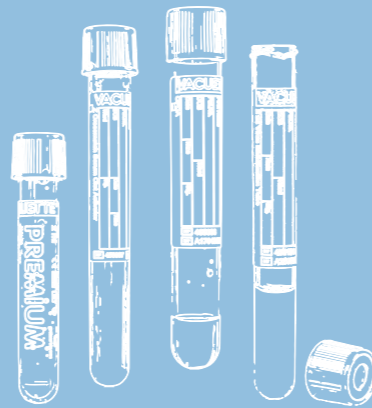

2 ДРУГА УПАКОВКА

Захищає зразки та містить абсорбуючий матеріал у разі витоку.

- / VACUETTE® Транспортна коробка (VTB) / VACUETTE® Транспортний контейнер (VTC)

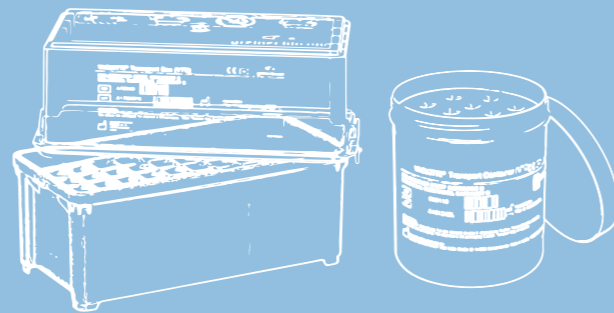

3 ТРЕТЯ УПАКОВКА

Захищає від механічних впливів, перепадів температури та світла. Маркування, що відповідає стандартам.

- / Коробка для транспортування
- / Isotherm сумка для транспортування



Гнучкі РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОДУКТІВ

VACUETTE®

Транспортна коробка (VTB)*

- / Міцний поліпропіленовий ящик
- / Для транспортування до 40 пробірок
- / Опціонально в комплект входить транспортна коробка
- / З практичною застібкою-кліком
- / Герметичність завдяки ущільнювальному кільцю/поглинаючій прокладці
- / Тримач для кулера
- / Штабельні



VACUETTE®

Транспортний контейнер (VTC)*

- / Поліпропіленовий контейнер практичного розміру
- / Для транспортування до 12 пробірок
- / Опціонально в комплект входить транспортна коробка
- / З гвинтовою застібкою
- / Вбираюча прокладка



*Зверніть увагу, що транспортний контейнер VACUETTE® (VTB) і транспортний контейнер VACUETTE® (VTC) відповідають нормам ADR/RID, IATA-DG, ICAO-TI та IMDG Code, лише якщо використовуються з відповідною транспортною коробкою або сумкою для транспортування, і що Greiner Bio-One не несе відповідальності за неналежне транспортування. Область правил, застосовна до транспортування автомобільним, залізничним, повітряним та/або морським транспортом.


RACK (стійка)

для пробірок для забору крові

- / Практичний штатив для 10 пробірок із зразками 11-17 мм зовнішній діаметр
- / 3 стійки вставляються в слоти у транспортній коробці VACUETTE® (VTB)
- / Автоклавується
- / Очищення звичайними дезінфікуючими та засобами для чищення
- / Підходить для архівування зразків

**FOAM INSERTS ПІНОПЛАТНІ ВСТАВКИ**

- / Для 40 (Transport Box) або 12 пробірок для зразків (транспортний контейнер).
- / Пінопластові вставки для пробірок діаметром від 9 до 16 мм
- / Автоклавується при 120°C відповідно до ASTM D 3574

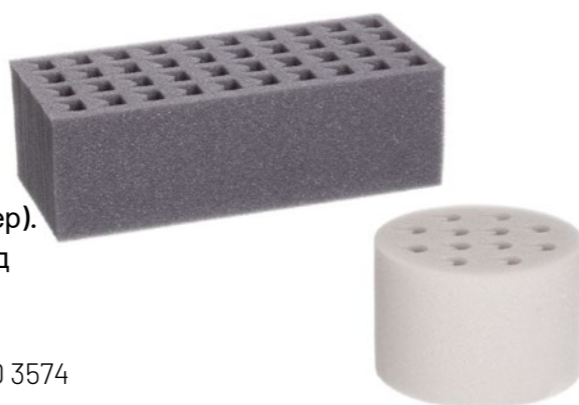**COOLING OPTIONS ВАРІАНТИ ОХОЛОДЖЕННЯ**

- / Кулер ідеально підходить для вставки в Транспортна коробка VACUETTE® (VTB) і сумки для транспортування Isotherm
- / Кулер (кругла) ідеально підходить для вставки в Контейнер для транспортування VACUETTE® (VTC)
- / Екстра плоский
- / Перезаряджається в холодильнику
- / Кулер відповідає DIN 18864

**ISOTHERM**

Транспортні сумки

- / Ізоляційний матеріал дозволяє транспортувати охолоджені зразки
- / Перевірено відповідно до вимог упаковки Інструкція Р650 (ADR/RID, IATA-DG, ICAO-TI та IMDG Code)
- / Велике оглядове вікно для транспортних паперів або додаткова інформація на звороті
- / Міцний і надзвичайно легкий дизайн

ДОСТУПНІ В РІЗНИХ РОЗМІРАХ:

- / Сумка прямокутної форми для 1 VTB
- / Сумка прямокутної форми для 2 VTBs
- / Сумка прямокутної форми для 3 VTBs
- / Сумка прямокутної форми для 4 VTBs
- / Сумка кругла для 1 VTC

**TRANSPORT CARTONS**

транспортні коробки

- / Коробка для транспортування VACUETTE® Транспортна коробка (VTB)
- / Коробка для транспортування VACUETTE® Транспортний контейнер (VTC)
- / Міцний ящик для транспортування
- / Маркування, що відповідає стандартам





БЕЗПЕЧНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ

Ваш персонал залишається постійно та професійно захищеним від потенційних інфекцій.



ПЕРЕВІРЕНО ТА СЕРТИФІКОВАНО

Усі продукти VACUETTE® Transport Line протестовані та сертифіковані незалежним акредитованим інститутом.



ШИРОКА РІЗНОМАНІТНІСТЬ АКСЕСУАРІВ

Greiner Bio-One пропонує вам усе необхідне для безпечного транспортування зразків.

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ

VACUETTE® Транспортні коробки

Item no.	Description	Qty. inner / outer
472001	VACUETTE® Transport Box (VTB), incl. Foam Insert for 40 Tubes, with Transport Carton HK0190	1 / 10
472040	VACUETTE® Transport Box (VTB), incl. Foam Insert for 40 Tubes	1 / 10
472010	Foam Insert for VACUETTE® Transport Box (VTB), for 40 Tubes (all sizes)	- / 168
472016	Cooler Pack for VACUETTE® Transport Box (VTB)	- / 104
472011	Rack for Blood Collection Tubes, 10 positions, autoclavable	1 / 100
472015	Absorbent Pad for VTB / VTC	- / 2,500

VACUETTE® Транспортні контейнери

Item no.	Description	Height	Width	Qty. inner / outer
800105	VACUETTE® Transport Container (VTC), incl. Foam Insert for 12 Tubes, with Transport Carton HK0259	128.7 mm	113 mm	1 / 12
800110	VACUETTE® Transport Container (VTC), incl. Foam Insert for 12 Tubes, without Transport Carton HK0259	128.7 mm	113 mm	1 / 12
800101	Foam insert for VACUETTE® Transport Container (VTC), for 12 tubes	70 mm	107 mm	- / 336
800102	Container volume 60 ml with absorbent pad and screw cap, without symbol	127 mm	28 mm	- / 300
472017	Cooler Pack for VACUETTE® Transport Container (VTC)	12 mm	107 mm	- / 150

Транспортні сумки

Item no.	Description	Height	Length	Width	Product colour	Qty. inner / outer
472020	for 1 piece VACUETTE® Transport Box (VTB), small	250 mm	300 mm	170 mm	● royal blue	1 / 16
472030	for 2 pieces VACUETTE® Transport Boxes (VTB), medium	250 mm	320 mm	300 mm	● royal blue	1 / 8
472023	for 3 pieces VACUETTE® Transport Boxes (VTB), medium	250 mm	480 mm	300 mm	● royal blue	1 / 4
472024	for 4 pieces VACUETTE® Transport Boxes (VTB), big	250 mm	640 mm	300 mm	● royal blue	1 / 4
472022	for 1 piece VACUETTE® Transport Container (VTC), small	160 mm	145 mm		● royal blue	1 / 50

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ
НВФ «СІМЕСТА ВААП» У ФОРМІ ТОВ
вул. Мельницька 20А,
м. Одеса, 65005, Україна
Тел.: +38 048 705 31 14 (15.....22),
info@simesta.com



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980181 en [rev.05 07.2021]


greiner
BIO-ONE